

取扱説明書


HAC2401A

EMS slim

EMSエクササイズマシン


このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

各部名称

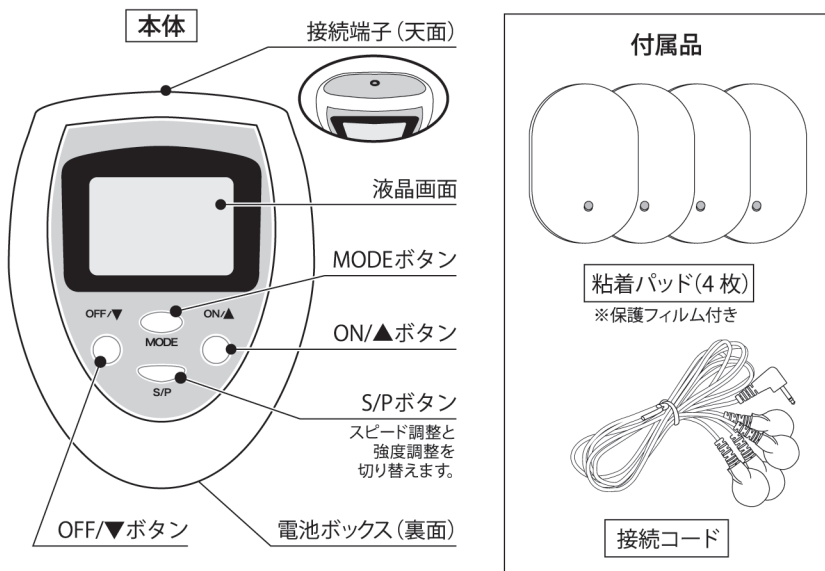

電池の入れ方

- 1 本体裏面の電池ボックスのフタを開けてください。
- 2 右図と同じ方向に単4電池2本を+、-を正しくセットしてください。
- 3 電池ボックスのフタを元通り取付けてください。

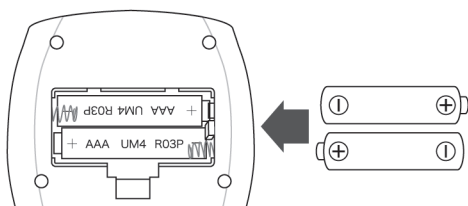

⚠ 電池に関する注意事項

- 古い電池と新しい電池や、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- ショートさせたり、充電・分解・加熱・火の中に入れてください。
- +-を正しくセットしてください。
- 電池を入れる際にきついと感じた場合は、無理にはめないでください。
(一部の電池は性能向上につき国際規格内での外形寸法の変更がなされている結果、電池ボックス寸法との兼ね合いで電池が入りにくい・取り出しにくい・電池の極が金具端子に届かないなどの状態が発生する為)
- 万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 長期間使用しない場合は電池を外してください。
- 電池の容量が少ないと誤作動(作動時間が極端に短い・15分経っても止まらない・電圧が安定しないなど)や液晶が反応しない・動作しないなどの症状が出る場合があります。このような場合は、新しい電池と交換してください。

⚠ 商品に関する注意事項


⚠ 下記の方は絶対に使用しないでください。

- ペースメーカーなどの体内埋込型医療用電子機器を使用されている方。
 - 人口心臓などの生命維持用医療用電子機器を使用されている方。
 - 心電計などの装着型の医療用電子機器を使用されている方。
 - 病中・病後・療養中の方。 ●心臓に障害または弱い方。 ●貧血ぎみの方。
 - 生理中または妊娠されている方。 ●皮膚感覚障害または皮膚に異常のある方。
 - 熱がある場合など、体に異常を感じている方。
- ※万一使用中に気分が悪くなった時は、すぐに使用を中止してください。
※頭部及び目の周りや心臓の近く、皮膚疾患の場所には使用しないでください。

- 1日の使用目安は2〜3回(1セット15分)までとし、連続して使用しないでください。
※電流の影響には個人差があるので、ご使用の際は注意してください。
- 必ず粘着パッド4枚全てを体に装着した状態でご使用ください。
※粘着パッド4枚全てを装着していない状態で本体の電源を入れないでください。
※粘着パッドの粘着力が弱まり、しっかりと装着できない場合は使用しないでください。
※使用後は、必ず本体の電源をOFFにしてから粘着パッドを外してください。
使用中にパッドが外れた場合は、必ず電源をOFFにしてください。そのままの状態では(粘着パッド4枚全てが装着されていない状態)使用しないでください。
※再度使用する場合は、粘着パッド4枚全てを装着し直してからご使用ください。
- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむを得ず汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 高温になる場所・湿気が多い場所・直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。
- 落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。
- 本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
- 浴室などの水場では使用しないでください。
- 濡れた手で扱わないでください。
- お手入れの際は、シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤は使用しないでください。
- ご使用後は粘着パッドを水で軽く洗って乾かし、保護フィルムを貼って保管してください。
※保護フィルムを貼らずに放置すると、表面が乾いて粘着力が弱まる場合があります。
- 分解・改造しないでください。故障や感電事故の原因となります。
- 子供など取り扱いに慣れない方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 一度に強度やスピードを上げ過ぎないでください。加減しながら調節してください。
- 睡眠時や運転中は使用しないでください。
- 本製品を本来の使用目的以外には使用しないでください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用またはその他の用途で使用しないでください。
- 子供の手の届く場所に保管しないでください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。


液晶画面表示

- ①モード動作中表示されます。
モード・スピード・強度により表示は変化します。
- ②スピードを表示します。1～10段階
- ③時間を表示します。1セット15分
時間は動作開始とともにカウントが始まります。
- ④モードを表示します。
選択しているモードのマーク(体の部位)が点滅します。
- ⑤強度を表示します。1～10段階

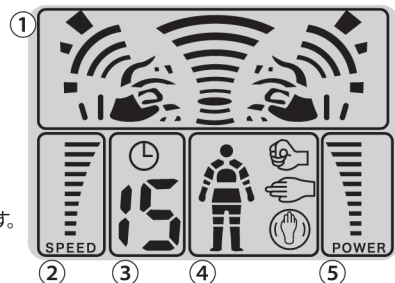

使用方法

- ①粘着パッド4枚全てを接続コードのスナップに取り付けます。
さらに本体天面の接続端子に、接続コードのプラグを差し込みます。

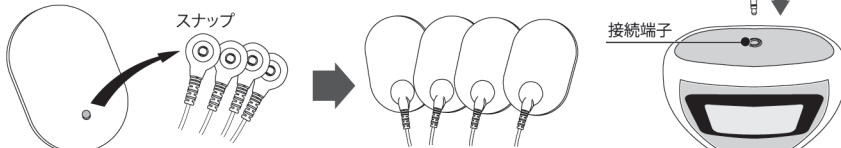

- ②体の使用したい部位に粘着パッド4枚全てを必ずしっかりと装着します。
※粘着パッド4枚全てを装着していない状態で本体の電源を入れしないでください。
また粘着パッド4枚全てを装着しないと、本体は正常に作動しません。
※粘着パッドの粘着力が弱まり、しっかりと装着できない場合は使用しないでください。
※粘着パッドの使用方法を誤ると火傷のような症状が出る場合があります。

- ③ON/▲ボタンを押すと電源が入り、液晶画面が表示されます。
※電源を入れてから約20秒間、無操作状態が続くと、自動的に電源が切れます。

- ④MODEボタンでお好みの【モード】を選びます。
MODEボタンを押すごとに下記の順番で【モード】が切り替わります。
※各モードの説明は右面をご参照ください。

モードA ▶ モードB ▶ モードC ▶ 肩モード ▶ お腹モード ▶ 腕モード ▶ 関節モード ▶ 脚モード



- ⑤ON/▲ボタンを押すと動作がスタートします。
- ⑥ON/▲ボタン OFF/▼ボタンで【強度調整】をします。1～10段階
ボタンを1回押すごとに強度が一段階変わります。

ON/▲ボタン ▶ 強度がアップします。 OFF/▼ボタン ▶ 強度がダウンします。

△必ず強度1から徐々に上げてください。

使用方法

- ⑦S/Pボタンを押すとON/▲ボタン OFF/▼ボタンが【スピード調整】に切り替わります。
S/Pボタンを押すごとに【強度調整】と【スピード調整】が切り替わります。

- ⑧ON/▲ボタン OFF/▼ボタンで【スピード調整】をします。1～10段階
ボタンを1回押すごとにスピードが一段階変わります。

ON/▲ボタン ▶ スピードがアップします。 OFF/▼ボタン ▶ スピードがダウンします。

△必ずスピード1から徐々に上げてください。

- ⑨使用後は必ず本体の電源をOFFにしてから粘着パッドを外してください。
また粘着パッドを水で軽く洗って乾かし、保護フィルムを貼って保管してください。
※保護フィルムを貼らずに放置すると、表面が乾いて粘着力が弱まる場合があります。

- モード動作を開始すると液晶画面上の時間のカウントが開始され、15分後に自動的に動作が停止し、電源がOFFになります。

- モード、強度、スピードはモード動作中も調整/切り替えできます。
モードを切り替えると強度/スピードは1に戻ります。

- 途中で停止する場合はOFF/▼ボタンで強度を1まで下げ、さらにもう一度OFF/▼ボタンを押すと電源がOFFになります。またはOFF/▼ボタンを押して、無操作状態になると約20秒で電源がOFFになります。

- 各モードの説明

お好みモード		
モードA	モードB	モードC
短い動作と間隔の連続的なリズム	長い動作と間隔の連続的なリズム	非常に長い動作と間隔の連続的なリズム

※お好みの部位へご使用ください。

各部位専用モード				
肩モード	お腹モード	腕モード	関節モード	脚モード

※ご使用になる部位に適したモードを選択してご使用ください。

【製品仕様】

材 質	ABS・PVC・PS
電 池	単4電池2本(別売)
サ イ ズ	約 W7.5×D2.5×H10cm
接続コード	約 110cm ※多少前後する場合があります
重 量	約 100g(商品合計)

発売元:株式会社ハック

〒578-0984
東大阪市菱江5-9-10

☎ 0120-976-089

【お問い合わせ】

月～金(祝日除く)9:30～17:00