


取扱説明書

HAC4354A/4355A

音波電動歯ブラシ PUREBRUSH ピュアブラシ

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

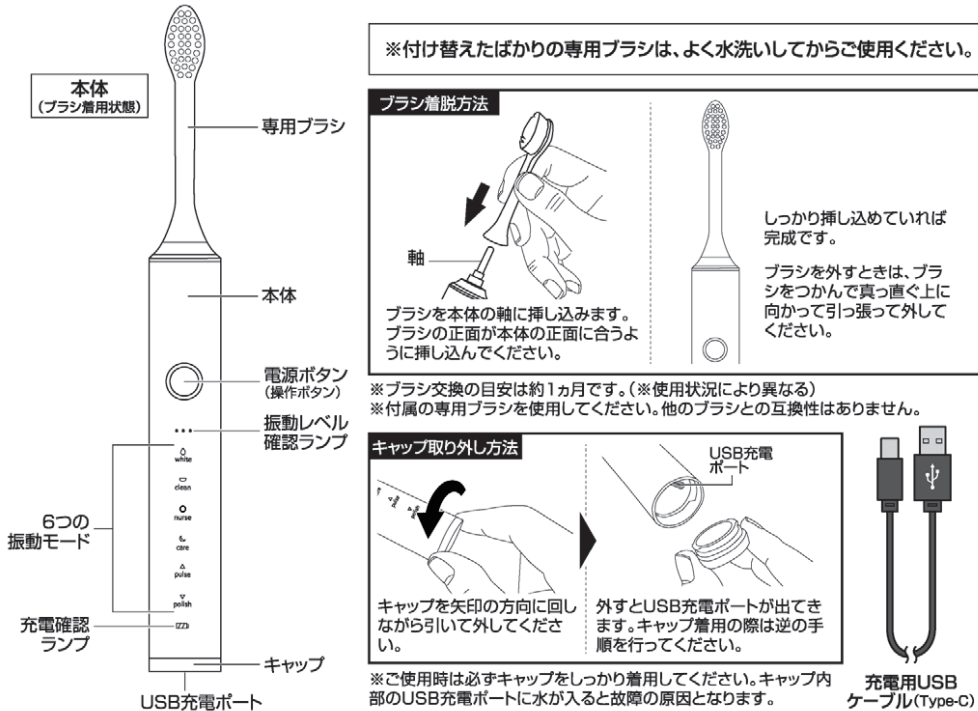


充電方法

※初めてお使いいただく際は充電を行ってから使用してください。

注意 充電の際や充電中に本体の電源は入れないでください。
本体が濡れた状態で充電を行わないでください。また、濡れた手で充電ポートに触れたり充電ケーブルを挿し込まないでください。

- ①電源をオフにしている状態で本体底部のキャップを外し、付属の充電用USBケーブルを5V/2A出力のアダプタに接続してください。充電中は充電確認ランプ部分が赤く点灯し、充電が完了すると青色に変わります。
- ②ランプが青色になったら、充電用USBケーブルを抜いて充電を終了してください。過充電は故障や電池の寿命を早める原因となります。

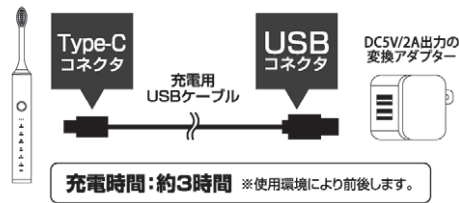

警告

- 製品に充電する際は必ず5V/2A出力の変換アダプタと付属の充電用USBケーブルを使用してください。
- 5V/2Aより上のアダプタは絶対に使用しないでください。
- 5V/2Aより低い出力のアダプタを使用した場合、記載の充電時間より長く充電に時間がかかります。

●本製品は充電残量が少なくなると動作時間が短くなったり、振動レベルを上げても振動数が緩やかになってしまう場合があります。
●内蔵電池は一定期間電力を与えられないと性能が著しく低下する場合があります。そのため一切使用しない場合でも数か月おきに充電を行ってください。また、長期間未使用の状態から使用する場合は十分な充電を行ってから使用してください。

ご使用前に必ずご確認ください

- 歯のお手入れ以外には絶対に使用しないでください。
- 使用中に不調や痛み・違和感を感じたり本製品に異常が生じた場合は、ただちに使用を中止してください。
- ヤニ取り用・美白用などの研磨剤が多く含まれている歯みがき剤との併用はしないでください。
- 治療中の歯や不安定な入れ歯など口腔内に気になる症状がある場合は、その部位での使用はしないでください。
- 下記に該当する方は、本製品を使用しないでください。
6歳未満の方、妊娠中・出産前後1ヵ月以内の方、自分で操作できない方、体調が優れない方

操作方法

●電源オン.....電源ボタンを1度押すと振動レベル確認ランプとモードランプが点灯して本体が振動します。

●電源オフ.....①未操作状態で5秒経過後に電源ボタンを1度押すと電源オフになります。
②電源をオンにして約1分30秒経過すると自動で電源オフになります。
③「polish(研磨)」モードの際に電源ボタンを1度押すと電源オフになります。

●振動レベル切替 ボタン操作後5秒以内に電源ボタンを長押しすると振動数が順に替わり、ボタンを離すと振動レベルが固定されます。



●振動モード切替 ボタン操作後5秒以内に電源ボタンを1度押すことにより上から順に振動モードが切り替わります。「polish(研磨)」振動モードの際に電源ボタンを押すと電源がオフになります。

振動モードについて	white	clean	nurse
	ホワイトニング スタンダードな振動	クリーニング 毎食後の歯垢ケアに	ソフト 優しくみがきたいときに
	care	pulse	polish
	ケア リズム変化で気分転換	マッサージ 高速なリズムに変化	研磨 強い圧で集中的にみがきたいときに

ご使用に関する注意事項

- 歯ブラシは歯の表面や歯茎に優しく当てて使用してください。
- 口腔内で強く動かしたり、強く押し当てたりしないでください。振動が正常に動作しなくなったり、怪我の原因となります。
- 出血時は患部に歯ブラシをあてないように注意してください。
- ご使用は使用時間の1分30秒を目安にしてください。長時間同じ箇所にあてないでください。
- ご使用後はブラシの汚れをしっかりと落とし、高温多湿を避けた清潔な場所に保管してください。

注意事項

●本製品は防水ですが、USB充電ポートに水が触れると故障の原因となります。ご使用時は必ずキャップをしっかりと閉めてください。また、プールやお風呂場など水没する危険性がある場所では使用しないでください。●小さなお子様やペットの手の届くところに置かないでください。また、誤飲に注意してください。●使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。●充電時間や使用時間が極端に短くなった場合は充電電池の寿命です。●分解・改造はしないでください。●本製品には電池が内蔵されています。落下などによる強い衝撃を与えたり、火の中に入れて、炎天下・高温の場所での使用や放置は絶対にしないでください。故障や液漏れ、破裂などの危険性があります。●廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

製品仕様

内蔵電池	リチウムイオン電池	使用電源	USB充電(Type-C)
電池容量	500mAh	入力電圧	DC5V/2A
充電可能回数	約400回(※充電電池交換不可)	サイズ	約W2.5×D2.7×H22.5cm
充電時間	約3時間(※使用環境により異なる)	重量	約75g
使用時間	約1分30秒で自動停止(※1回)	主材質	ABS, PBT
連続使用回数	約100回(※振動レベル:中の場合)		

発売元: 株式会社ハック

〒578-0984
東大阪市菱江5-9-10

☎0120-976-089
【お問い合わせ】月~金(祝日除く) 10:00~16:00